


Vorhofflimmern? Erkennen!



Innovative Systemlösungen für die kardiopulmonale Diagnostik

custo VHF-Diagnostik*: Vorhofflimmern in nur 5 Schritten erkennen!

Der Weg zur zweifelsfreien VHF-Diagnostik ist in custo diagnostic schnell und zuverlässig. Ein Anfangsverdacht auf Vorhofflimmern lässt sich in nur 5 Schritten bestätigen oder verwerfen.

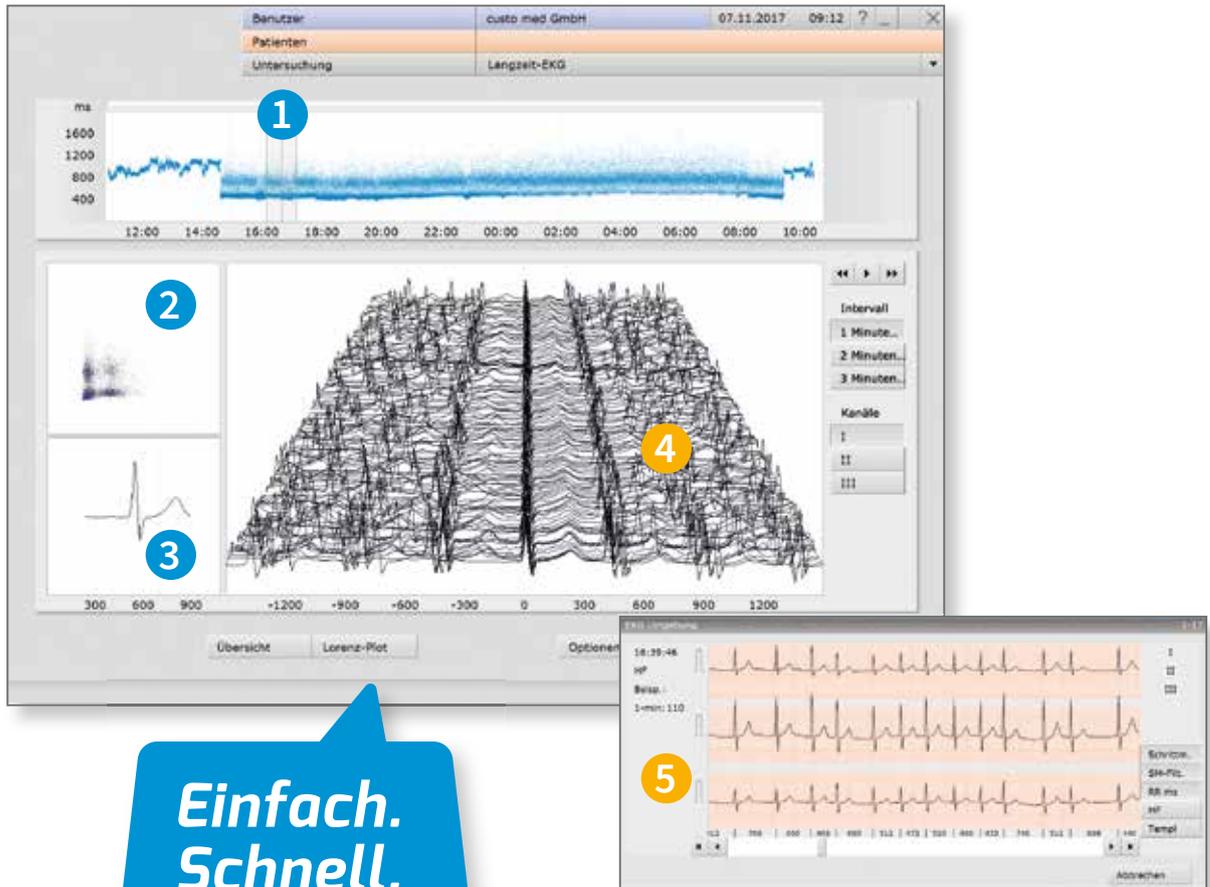

Identifikation

- 1** Im **RR-Trend** sind hochfrequente Bereiche, die möglicherweise vom Sinusrhythmus abweichen, gut erkennbar.
- 2** Der **Lorenz-Plot** zeigt, ob eine Rhythmusstörung oder Vorhofflimmern vorliegen könnte.
- 3** Im **Summenkomplex** ist zu erkennen, ob eine P-Welle vorliegt oder nicht.

Verifizierung

- 4** Im **Relief-EKG** können Beginn und Ende einer Flimmerepisode einfach und schnell erkannt werden.
- 5** Das **Original-EKG** erlaubt die zweifelsfreie Beurteilung. **Unklare und unsichere Befunde bzgl. Vorhofflimmern gehören von nun an der Vergangenheit an.**

custo VHF-Diagnostik* – das neue Feature in der Langzeit-EKG-Software.

* Die Vorhofdiagnostik ist Bestandteil der Software custo diagnostic professional (Langzeit-EKG) ab Version 4.6 /5.1 und kompatibel mit allen Langzeit-EKG-Rekordern von custo med.

Langzeit EKG Aktionspaket 1 multiday VHF: custo tera professional Software + LZ-EKG Rekorder custo flash 500

Die Basis-Software **custo tera professional** erlaubt Ihnen zusätzlich zur light-Version die Funktionen Gesamt-EKG, den Export als PDF-Datei, gezieltes Reduzieren der Datenmenge, bei Einsatz eines Kombi-Rekorders die Funktion „Kombi-Auswertung mit Langzeit-Blutdruck“ und bei Einsatz eines custo flash 500/510 die multiday-Auswertung bis zu 7 Tagen.

- Analysesoftware **custo tera professional**
- LZ-EKG Rekorder **custo flash 500**
- Ladeteil, Kartenleser
- **custo diagnostic standard**
- Netzwerkfähigkeit 3 Plätze
- PC-System erforderlich

* inkl. Software und Zubehör, zzgl. Installation



Ohne Vorhof-Diagnostik
Mit custo tera standard Software
5.090,- € statt 5.920,- €

Preise zzgl. MwSt., zzgl. Installation, inkl. Einweisung. Angebot gültig bis 31.10.2019. Angebot freibleibend.

Langzeit EKG Aktionspaket 2 multiday VHF + Schrittmacher: custo tera professional Software + LZ-EKG Rekorder custo flash 510

Die Basis-Software **custo tera professional** verfügt zusätzlich über die Digitale Schrittmacher Detektion (Spikebreite).

- Basissoftware **custo tera professional**
- LZ-EKG Rekorder **custo flash 510**
- Ladeteil, Kartenleser
- **custo diagnostic standard**
- Netzwerkfähigkeit 3 Plätze
- PC-System erforderlich

* inkl. Software und Zubehör, zzgl. Installation



Zweitgeräte **:
Langzeit EKG custo flash 500:
1.780,- € zzgl. MwSt.
Langzeit EKG custo flash 510:
1.980,- € zzgl. MwSt.

** ohne Software, inkl. Zubehör


Wir empfehlen einen zusätzlichen Akku für konsequente Auslastung des **custo flash 500** bzw. **custo flash 510**:

Lithium Ionen Akku 105,- € zzgl. MwSt.

Innovative Systemlösungen für Ihre Diagnostik

Unsere Marke steht seit 1982 für innovative Systemlösungen in der kardiopulmonalen Diagnostik. In Kooperation mit engagierten und kompetenten Vertriebs- und Servicepartnern bieten wir professionelle Lösungen an und berücksichtigen dabei Ihre individuellen organisatorischen Gegebenheiten und IT-Strukturen. Ob stationär oder mobil, Einzelplatz oder standortübergreifende Netzwerklösung, Praxis oder Krankenhaus – Ihr modulares custo med-System ist eine lohnende Investition in die Zukunft.

Unsere modulare Plattform custo diagnostic ist die intelligente Verbindung zwischen Medizintechnik und Verwaltungssoftware.

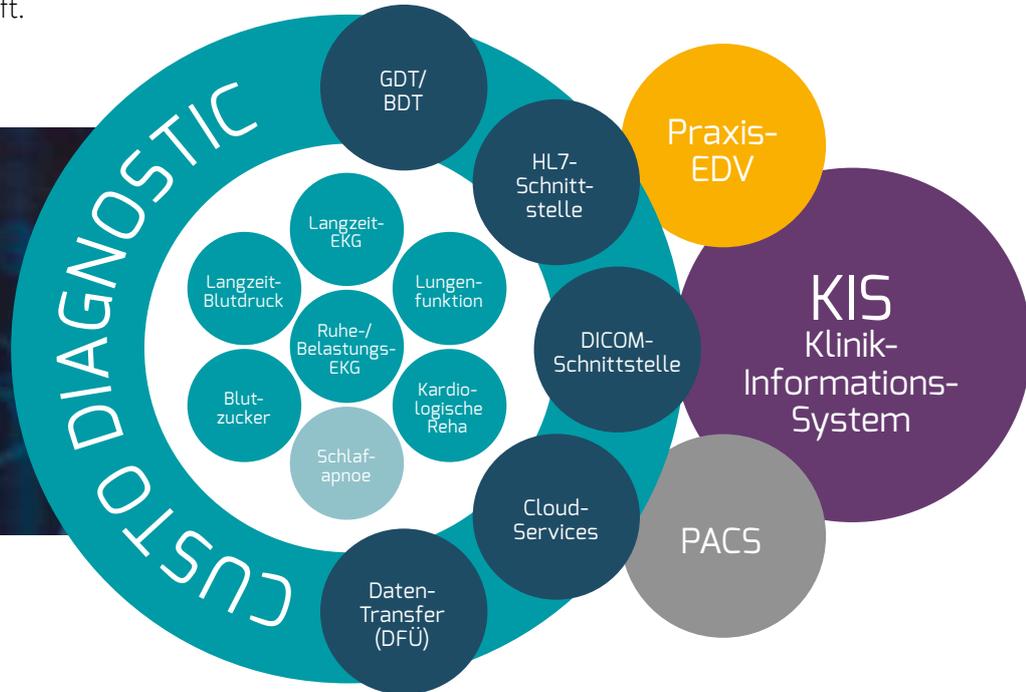

www.customed.de

FAX: 0 68 25 / 80 00 - 27 112

Varitec AG • Auf Pfuhlst 3 • 66589 Merchweiler • Telefon 0 68 25/80 00-112 • www.varitec.de • E-Mail service@varitec.de
Bitte ausfüllen und an Varitec AG faxen oder in einem Briefumschlag an Varitec AG senden.

Bitte kontaktieren Sie mich zum Thema VHF-Diagnostik und Langzeit-EKG.

Bitte senden Sie mir Ihren aktuellen Hauptkatalog zu.

PRAXIS-/KLINIK-ANSCHRIFT:

Name _____
 Straße _____
 PLZ/Ort _____
 Telefon _____
 Fax _____
 E-Mail _____

Bitte senden Sie mir Informationmaterial:

Ruhe-/Belastungs-EKG
 Langzeit-EKG
 Langzeit-Blutdruck
 Lungenfunktion
 Blutzucker
 Schlafapnoe
 Kardiologische Reha
 EKG-Messplätze

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO: Varitec AG, Auf Pfuhlst 3, 66589 Merchweiler. Wenn Sie zukünftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte schriftlich per E-Mail an datenschutz@varitec.de oder per Post an die zuvor genannte Adresse mit. Informationen zur Datenerhebung für Kunden gemäß Art. 13 DSGVO und zum Datenschutz finden Sie im Downloadbereich unter www.varitec.de.